

Instructions for use



- EN** see www.fkg.ch for additional information
FR informations supplémentaires sur www.fkg.ch
DE weitere Informationen auf www.fkg.ch



ScoutRace & ISO 10

Endodontic instruments
 Instruments endodontiques
 Endodontische Instrumente

FKG REF. 99.7AA.10.15A.XX - n°104 - 2018/01

ScoutRace & ISO 10

Description - Beschreibung



Taper (1) and ISO diameter (2) identification
 Identification conicité (1) et diamètre ISO (2)
 Identifizierung der Konizität (1) und des ISO-Durchmessers (2)



Depth marks ▲ (in millimetres)

Available on 21 / 25 / 31 mm instruments

Marques de profondeur ▲ (en millimètres)

Disponibles sur instruments de 21 / 25 / 31 mm

Längenmarkierungen ▲ (in Millimeter)

Verfügbar auf Instrumente der Länge 21 / 25 / 31 mm

Example on 25 / 31 mm instruments
 Exemple sur des instruments de 25 / 31 mm
 Beispiel auf Instrumenten der Länge 25 / 31 mm



SafetyMemoDisc (SMD)

Pull off petals to master metal fatigue:
 Retirer les pétales pour maîtriser la fatigue du métal:
 Entfernen Segmente zur Kontrolle der Metallermüdung:

- 1 × Simple case/cas simple/einfach Fall
 2 × Medium case/cas moyen/mittlere Fall
 4 × Difficult case/cas difficile/schwierig Fall

Rubber stop - ISO length/active part
 Rubber stop - longueur ISO/partie active
 Rubber stop - ISO Länge/Wirkteil

- 21/16mm ● 25/16mm ● 31/16mm

EN Golden rules

- Speed: 600-800 rpm
 Torque: 1.5 Ncm
- Long back and forth gentle strokes
 - Light touch, let the instrument work
 - Work 3-4 seconds in a row, get out, clean the blade and irrigate the canal

FR Règles d'or

- Vitesse : 600-800 tr/min
 Couple : 1.5 Ncm
- Amples mouvements de va-et-vient
 - Main légère, laisser travailler l'instrument
 - Travailler 3-4 secondes d'affilée, sortir, nettoyer la lime et irriguer le canal

DE Golden Regeln

- Drehzahl: 600-800 1/min
 Drehmoment: 1.5 Ncm
- Lange hin- und her- Bewegungsablauf
 - Leichte Hand, das Instrument arbeiten lassen
 - 3-4 Sekunden auf einmal, dann herausnehmen, Schneidkanten reinigen und den Kanal spülen

ScoutRace 1 blister includes/contient/enthält: 2 × 10/.02, 2 × 15/.02, 2 × 20/.02

For canals with a severe apical curvature or S-shape

Manual scouting with ISO 06-08 SSt files up to estimated working length (WL); confirm WL with an apex locator

1. Introduce ScoutRace (SR) 10/.02 in rotation and reach WL;
2. Continue with SR 15/.02 up to WL;
3. Finish glide path with SR 20/.02 up to WL;
4. Final shaping with the main NiTi sequence (e.g. iRace or BioRace).

Pour canaux avec forte courbure apicale ou type S

Estimer la longueur de travail (LT) avec des limes manuelles acier ISO 06-08, confirmer la LT avec un localisateur d'apex.

1. Introduire ScoutRace (SR) 10/.02 en rotation et progresser jusqu'à la LT;
2. Continuer avec SR 15/.02 jusqu'à la LT;
3. Terminer avec SR 20/.02 jusqu'à la LT;
4. Mise en forme finale avec la séquence NiTi principale (p.ex. iRace ou BioRace).

Für Kanäle mit äußerster apikaler Krümmung oder S-förmig

Zuerst Arbeitslänge (AL) mit Handinstrumente ISO 06-08 abschätzen, dann AL mit Apexlokator bestimmen.

1. ScoutRace (SR) 10/.02 rotierend einführen und AL erreichen;
2. Mit ScoutRace (SR) 15/.02 auf AL fortführen;
3. Mit ScoutRace (SR) 20/.02 auf AL beenden;
4. Aufbereitung mit grundsätzlicher Sequenz erfüllen (z.B. iRace oder BioRace).


Case with an apical S-shape curvature / Cas avec courbure apicale de type S / Fall mit S-förmiger apikaler Krümmung



1. Pre-op: Pulpitis/Pulpite



2. Difficulty/Difficulté/Herausforderung

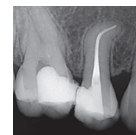

3. Post-op: 35/.04

Race ISO 10 1 blister includes/contient/enthält: 2 × 10/.02, 2 × 10/.04, 2 × 10/.06

For narrow and/or calcified canals

Manual scouting with ISO 06-08 SSt files up to estimated working length (WL); confirm WL with an apex locator.

1. Introduce Race 10/.02 in rotation and reach WL;
2. Continue with Race 10/.04 up to WL;
3. Finish glide path with Race 10/.06 up to WL;
4. Final shaping with the main NiTi sequence (e.g. iRace or BioRace).

Pour canaux étroits et/ou calcifiés

Estimer la longueur de travail (LT) avec des limes manuelles acier ISO 06-08, confirmer la LT avec un localisateur d'apex.

1. Introduire Race 10/.02 en rotation et progresser jusqu'à la LT;
2. Continuer avec Race 10/.04 jusqu'à la LT;
3. Terminer avec Race 10/.06 jusqu'à la LT;
4. Mise en forme finale avec la séquence NiTi principale (p.ex. iRace ou BioRace).

Für kalifizierten u./o. engen Kanälen

Zuerst Arbeitslänge (AL) mit Handinstrumente ISO 06-08 abschätzen, dann AL mit Apexlokator bestimmen.

1. Race 10/.02 rotierend einführen und AL erreichen;
2. Mit Race 10/.04 auf AL fortführen;
3. Gleitpad mit Race 10/.06 auf AL beenden;
4. Aufbereitung mit grundsätzlicher Sequenz erfüllen (z.B. iRace oder BioRace).

Case with constricted and obliterated canals / Cas avec canaux étroits et calcifiés / Fall mit kalifizierten und engen Kanälen



1. Pre-op: Pulpitis/Pulpite



2. Difficulty/Difficulté/Herausforderung



3. Post-op: MB & DB - 35/.04
 P - 50/.04

Cases: courtesy of / Cas: source / Fälle: Genehmigung von - Dr. G. Debelian (No)

EN Sterilization protocol for reusable medical devices

Non sterile products

First use

Carefully follow the rules herebelow

Cleaning and Sterilization

Cleaning

1. Manual cleaning with/without Ultrasonic assistance

Thorough cleaning allows efficient disinfection & sterilization.

2. Rinse

Under distilled/demineralized water at least 1 min.

Then dry the instruments.

Sterilization

5. According EN/ISO 17664 protocol

Autoclave: 134°C/273°F,

2.2 bar during 18 min.

 Always refer to manufacturer's instructions for cycle & duration

Second and following uses

7. Pre-disinfection

Plunge instruments after use in detergent solution and eventually brush them manually

 Complete operating protocol and warnings on www.fkg.ch

General information

Pre-/Disinfection

DO NOT USE

solutions containing:

- phenol (corrosion)
- aldehyde (blood fixation)
- di-/trietanolamines (corrosion)

Caution:

This product contains nickel and should not be used for individuals with known allergic sensitivity to this metal.

A single patient use is recommended to avoid cross-contamination.

Sterile products

First use

1. Open the alveolus
2. Extract the instrument (use of gloves imperative)
3. Use the instrument according to good dental practice

Second use:

Carefully follow the rules herebelow

Second and following uses.

3. Inspection - Check

Sort out damaged or worn out instruments.

4. Packing

Place the instruments in a suitable support/container and pack the devices in sterilisation pouches ISO 11607-1.

6. Storage

Keep devices in sterilization wrap/pouch in a dry and clean environment.

8. Rinse

Under running water at least 1 min.

Then dry the instruments.

9. Follow steps 1 - 6 above

Sterilization with chemiclav or dry air devices

have not been validated by FKG Dentaire.

Refer to manufacturer's instructions for cycle & duration. Nevertheless our instruments withstand such methods.

 200°C
(392°F)

FR Protocole de stérilisation pour dispositifs médicaux réutilisables

Produits non stériles

Première utilisation

Suivre attentivement les étapes ci-dessous **Nettoyage et Stérilisation**.

Nettoyage

1. Nettoyage manuel avec ou sans assistance d'ultrasons

Un bon nettoyage permet une désinfection et stérilisation de qualité.

2. Rinçage

Avec de l'eau déminéralisée ou distillée pendant au moins 1 min. Sécher les instruments.

Stérilisation

5. Selon protocole EN/ISO 17664

Autoclave: 134°C/273°F,

2.2 bar pendant 18 min.

 Toujours se référer aux instructions du fabricant pour la durée du cycle

Deuxième utilisation et suivantes

7. Pré-désinfection

Plonger les instruments juste après utilisation dans une solution désinfectante et éventuellement les brosser manuellement

 Protocole complet et mises en garde sur www.fkg.ch

Informations générales

Pré-/Désinfection

NE PAS UTILISER

Des solutions contenant:

- phenol (corrosion)
- aldehyde (fixation du sang)
- di-/trietanolamines (corrosion)

Attention:

Ce produit contient du nickel et ne devrait pas être utilisé chez des patients présentant une sensibilité allergique à ce métal.

L'utilisation des instruments sur un seul patient est recommandée pour éviter les contaminations croisées.

Produits stériles

Première utilisation

1. Ouvrir l'alvéole
2. Extraire l'instrument (l'utilisation de gants est impérative)
3. Utiliser l'instrument selon les bonnes pratiques dentaires

Deuxième utilisation:

Suivre attentivement le point ci-dessous **Deuxième utilisation et suivantes**.

3. Inspection - Contrôle

Jeter les instruments cassés ou déformés

4. Emballage

Placer les instruments dans un emballage conforme aux normes ISO 11607-1.

6. Stockage

Garder les instruments dans leur sachet de stérilisation dans un endroit sec et propre.

La stérilisation avec des chemiclaves ou four à air chaud n'a pas été validée par FKG Dentaire.

Se référer aux instructions du fabricant pour la durée du cycle. Nos instruments supportent néanmoins ces méthodes.

 200°C
(392°F)

DE Protokoll zur Sterilisation von wieder verwendbaren medizinischen Produkten

Nicht sterile Produkte

Erste Anwendung

Arbeitsgang Reinigung und Sterilisation folgen - siehe unten .

Reinigung

1. Manuelle Reinigung mit oder ohne Ultraschall-hilfe

Eine akkurate Reinigung erlaubt bessere Desinfektion & Sterilisation.

2. Spülung

Vorzugsweise demineralisiertes oder destilliertes Wasser mind. 1 Min. verwenden, dann trocknen.

Sterilisation

5. Nach EN/ISO 17664 Protokoll

Autoklav: 134°C/273°F,

2.2 bar mindestens 18 min.

 Bitte beziehen Sie sich auf die Anleitung des Geräteherstellers

Zweite und nachfolgende Anwendungen

7. Vordesinfektion

Alle Instrumente in eine desinfizierende Reinigungslösung einlegen und eventuelle Rückstände mit einer Bürste oder Tuch entfernen.

 Komplette Vorgehensweise und Warnungen auf www.fkg.ch

Allgemeine Hinweise

Vor-/Desinfektion

NICHT BENUTZEN

Lösungen mit:

- Phenol (Korrosion)
- Aldehyde (fixierendes Blut)
- Di-/Triethanolamines (Korrosion)

Warnung:

Dieses Produkt enthält Nickel und sollte nicht bei Personen verwendet werden, bei denen dieses Metall eine allergische Reaktion verursacht.

Die Einmalanwendung der Instrumente wird empfohlen um Kreuzkontamination zu vermeiden

Sterile Produkte

Erste Anwendung

1. Die Blisterverpackung öffnen
2. Das Instrument herausziehen (Schutzhandschuhe zwingend)
3. Das Instrument nach Gebrauchsanweisung benutzen

Zweite Anwendung:

Arbeitsgang Zweite und nachfolgende Anwendungen folgen - siehe unten.

3. Kontrolle

Zustand der Instrumente prüfen, defekte Instrumente entsorgen (falls gebrochen oder verformt)

4. Verpackung

Instrumente nach der Reinigung in Sterilisationstaschen - normkonform ISO 11607-1 - verpacken.

6. Lagerung

Sterilisierte Instrumente in der Packung trocken und sauber lagern.

8. Spülung

Instrumente gründlich mit sauberem Wasser spülen mind. 1 Min., dann trocknen.

9. Folgen Schritte 1 - 6 siehe oben

Sterilisation mit Chemiclave oder Heissluftsterilator

ist nicht von FKG Dentaire freigegeben. Bitte

beziehen Sie sich auf die Anleitung des Geräteherstellers. Dennoch unsere Instrumente sind für solche Methoden geeignet

 200°C
(392°F)